

多目的平行棒

TH-2500





このたびは多目的平行棒TH-2500をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。
またこの取扱説明書をいつでもご覧になれるように大切に保管してください。



安全上のご注意

お使いになる前によくお読み下さい。

サイン	内 容
 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 警告	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害（※）の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図・記号の例



この記号は禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、この記号の近くに文書で示します。



誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害（※）の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

安全上のご注意



注 意

修理、改造を行なわないでください。

※事故やトラブルにつながる恐れがあります。

組み立て時、乳幼児を近づけないでください。

※部品を口にするなど事故を誘発する恐れがあります。

十分なスペースを確保し、水平な場所で組み立ててください。

また、床を傷つけないよう必ずシートなどを敷いてください。

※事故の誘発や転倒、また床が傷つく恐れがあります。

各部がしっかり固定されているかを動かして確認してください。

※しっかり固定されていないとハンドルが落下しケガをする恐れがあります。

本機は水平な床の上で使用してください。


畳やカーペットなどの上で使用する場合は、本機が安定していることを確認してください。

※転倒してケガをする恐れがあります。


設置には乗降や運動に十分な広さを確保してください。

※事故を誘発する恐れがあります。

安全上のご注意

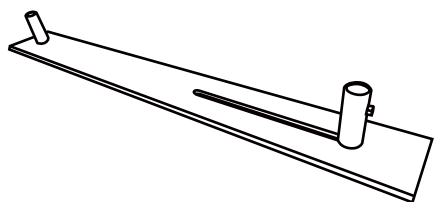

ベース ×2

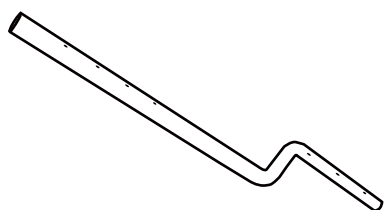


支柱 ×4




ピン ×4




ノブ ×8

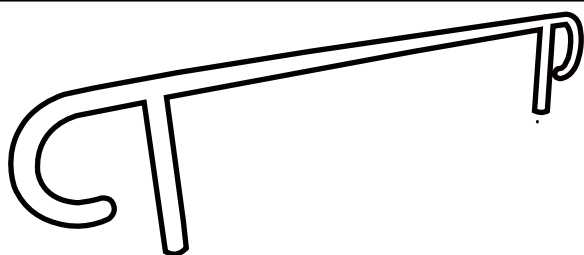

手すり ×2

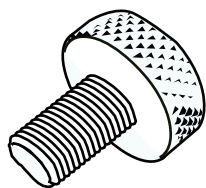


手すりネジ ×2

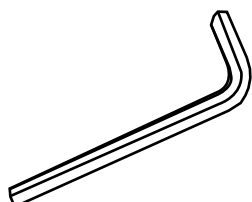

六角レンチ ×1

組み立て方法

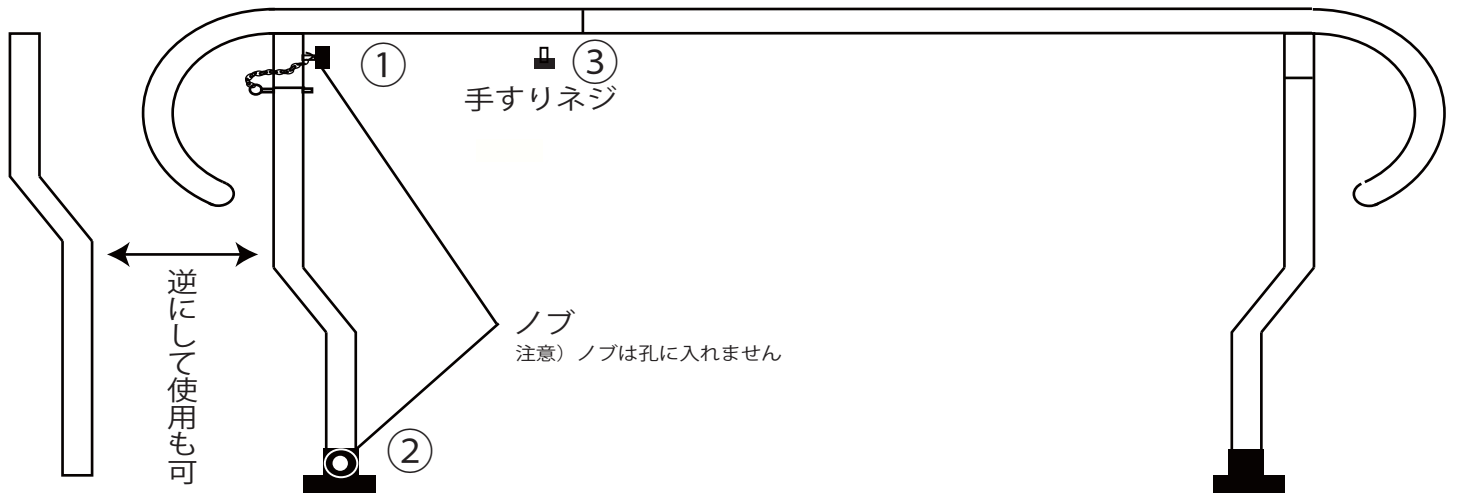

①



ノブ（上側）

ピンを孔に入れて手すり側のパイプがピンに乗りかかる様にして下さい。ノブは最後に締めます。

②



ノブ（下側）



③




手すりネジ

長さを決めてから指で強めに締めます。

可動部分

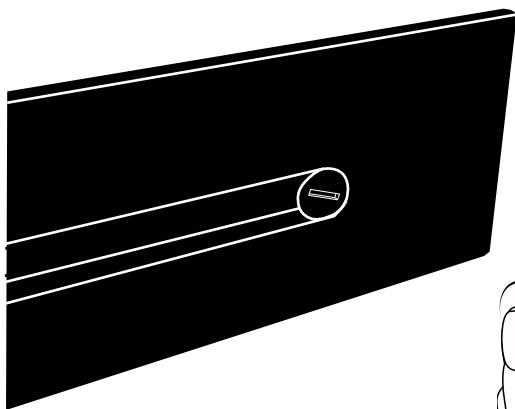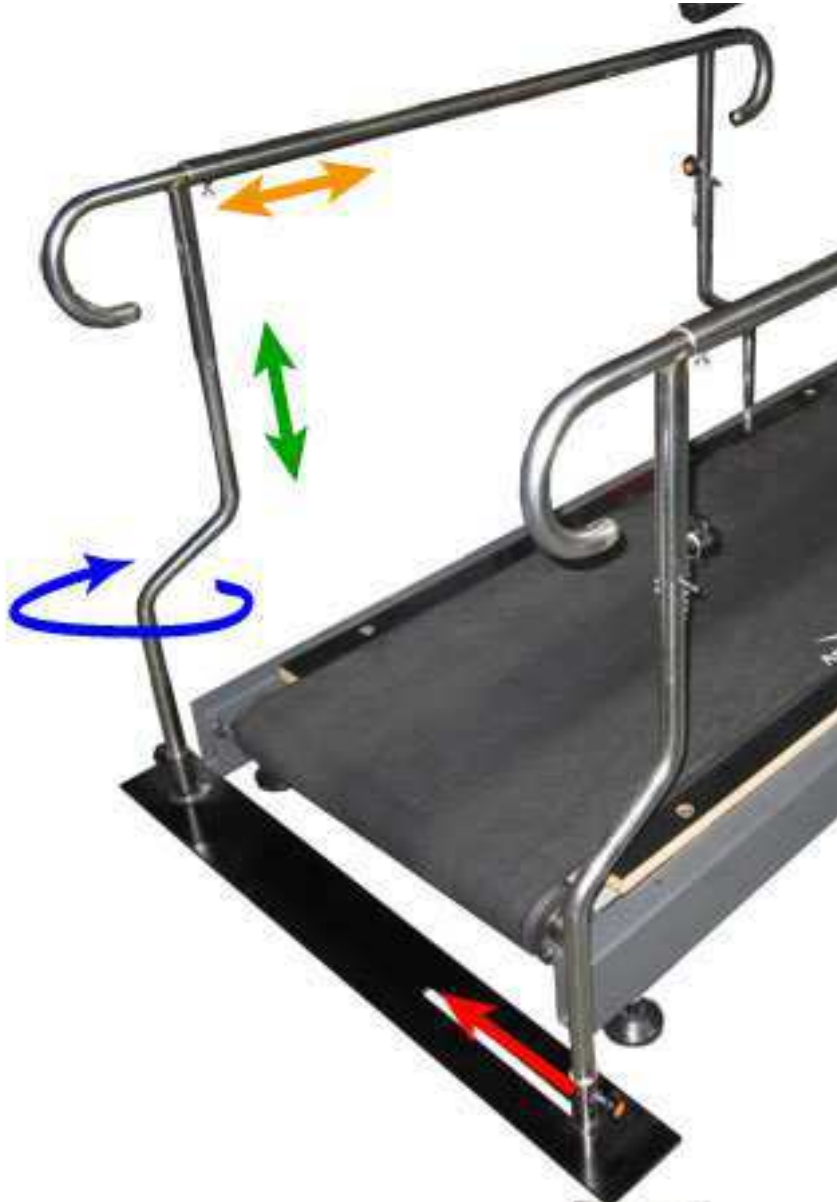

支柱をスライドさせるにはベースを裏側にして
硬貨などで左図のベースのボルトを緩めて
調整してください。

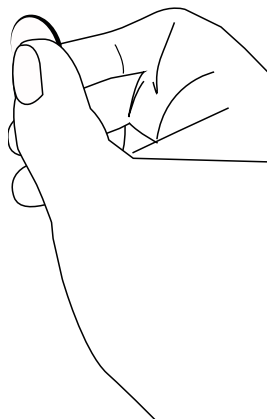

保証規定

- 1.) 取扱説明書に従った正常な使用状態で、お買い上げ後 2 年以内に故障した場合には無償修理いたします。
- 2.) 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてご購入店または(株)中旺ヘルスへ依頼または送付してください。
- 3.) 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - ・ 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - ・ 本書の提示がない場合。
 - ・ 本書にお買い年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ・ 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ・ 車両や船舶等に設置された場合に起因する故障および損傷。
- 4.) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5.) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、中旺ヘルス健康機器を、お買い求めいただきありがとうございました。本機は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、2 年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印して
いただいでください

品名： 多目的平行棒

形式： TH-2500

ご芳名：

ご住所：

Tel. ()

お買い上げ店名：

住所：

Tel. ()

お買い上げ年月日： 年 月 日

シリアルNo.

「中旺ヘルス製品についてのお問い合わせ ・ ご相談は「中旺ヘルスお客様相談センター」

本社：〒452-0011 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 丁目 2-2

E-mail : hj@jp-chuoh.com

URL : www.jp-chuoh.com

東京営業所：TEL : (03)3835-4399

TEL : (052)501-2577

FAX : (052)501-2588